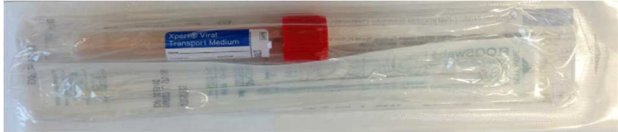


Ninaneelukaape võtmise juhend nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks

Jälgi ohutusreegleid, et kaitsta ennast ja vältida nakkuse levikut. Kasuta ettenähtud isikukaitsevahendeid. COVID-19 kahtlusega patsiendi käsitlemisel isikukaitsevahendite kasutamise info kliinikumi kodulehel: <https://intranet.kliinikum.ee/covid-19-juhendid/814-covid-19-infektsioonikontrolli-juhendid>

Proovinõu tüüp	Proovimaterjal	Säilitustingimused
UTM-katsuti tampooniga 	Ninaneelukaabe	Toatemperatuuril kuni üks ööpäev 2...8 °C juures kuni seitse ööpäeva SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2...8 °C juures kuni üks ööpäev
Steriilne tampooniga katsuti Kolm erinevat tampooni: valge korgiga – ultra väike tampoon lastele oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon (eelistatult) roheline korgiga – ultra õhuke tampoon 	Ninaneelukaabe	2...8 °C juures kuni kolm ööpäeva SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2...8 °C juures kuni üks ööpäev

Proovimaterjali kogumine:

- Selgita patsiendile materjalivõtu protseduuri.
- Kasuta proovimaterjali kogumiseks UTM-tampooni (eelistatult) või steriilset tampooniga katsutit.
- Märkista proovinõu võõtkoodi või patsiendi andmetega kirjutatult.
- Juhul kui patsiendil on nohu, peab patsient enne materjalivõttu nuuskama nina sekreedist tühjaks. Rohke sekreet võib takistada korrektse kaape kogumist.



Ninaneelukaape kogumisel patsient kallutab pea kuklasse. Täiskasvanutel võta materjal tampooniga alumise ninakarbiku piirkonnast, 5—7 cm sügavuselt ninaneelust. Lastel nina-kõrva telje keskpunktist.

Lükka tampoon õrnalt ninna. **Keera ninaneelu sisestatud tampooni tugeva pöörava liigutusega vastu limaskesta 5 korda ja hoia paigal 5 sekundit, et koguda võimalikult palju nakatunud rakke.**

Eemalda tampoon ninast. Hoidu tampooniga midagi puudutamast (hoia tampooni käes) ja vii tampoon katsutisse.

- **UTM-katsuti** korral keera katsutilt kork pealt ja aseta tampoon katsutisse. Murra tampoon murdejoonelt vastu katsuti külge pooleks, vajadusel keera tampooni nii et see korralikult murduks. Viska ära ülemine murtud osa. Sule katsuti korralikult korgiga.
- **Steriilse tampooniga katsuti** korral, lükka tampoon tagasi katsutisse. Veendu, et katsuti kork on lõpuni kinni lükatud.

- Aseta tampooniga katsuti minigrip kilekotti. NB! Välti minigrip koti välispinna saastumist (ära katsu samade kinnastage millega proovimaterjali võtsid, vaheta kindad). Saastumiskahtluse korral desinfitseeri kilekoti välispind. Transportimiseks pakenda kogutud proovimaterjalid minigrip kilekottides eraldi suuremasse minigrip kilekotti. Juhul, kui proovimaterjal saadetakse laborisse koos paber kandjal tellimislehega, pakenda tellimislehed eraldi minigrip kilekotti.
- Saada proovimaterjal laborisse.