

## URIINI BIOKEEMILISTE UURINGUTE TELLIMISLEHT

Patsiendi PERENIMI:..... EESNIMI:.....

Isikukood (või sugu ja vanus):..... Proovivõtu kuupäev:.....

Tellija (nimi, kood):..... Proovivõtu kellaaeg:.....

Tellija telefon:..... Proovivõtja (nimi, kood):.....


 Asutus, osakond:..... **Täita ööpäevase uriini kogumise korral**
**24 h uriini kogus ..... mL**

| Uriinikatsuti                                                       |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kaalium ööpäevases uriinis                 | <input type="checkbox"/> Valk ööpäevases uriinis                             |
| <input type="checkbox"/> Kaalium uriinis                            | <input type="checkbox"/> Valgu ja kreatiniini suhe uriinis                   |
| <input type="checkbox"/> Naatrium ööpäevases uriinis                | <input type="checkbox"/> Vabade kergete ahelate hulk ööpäevases uriinis      |
| <input type="checkbox"/> Naatriumi ja kreatiniini suhe uriinis      | <input type="checkbox"/> Metanefriin ööpäevases uriinis*                     |
| <input type="checkbox"/> Naatrium uriinis                           | <input type="checkbox"/> Normetanefriin ööpäevases uriinis*                  |
| <input type="checkbox"/> Kaltsium ööpäevases uriinis*               | <input type="checkbox"/> 5-HIAA ööpäevases uriinis*                          |
| <input type="checkbox"/> Kaltsiumi ja kreatiniini suhe uriinis      | <input type="checkbox"/> Vask ööpäevases uriinis                             |
| <input type="checkbox"/> Kaltsium uriinis                           | <input type="checkbox"/> Deltaaminolevuliinhappe ja kreatiniini suhe uriinis |
| <input type="checkbox"/> Magneesium ööpäevases uriinis*             | <input type="checkbox"/> Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis        |
| <input type="checkbox"/> Magneesiumi ja kreatiniini suhe uriinis    | <input type="checkbox"/> Porfüriinide ja kreatiniini suhe uriinis            |
| <input type="checkbox"/> Magneesium uriinis                         |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Kloriid ööpäevases uriinis                 | <input type="checkbox"/> Ecstasy uriinis                                     |
| <input type="checkbox"/> Kloriid uriinis                            | <input type="checkbox"/> Amfetamiin uriinis                                  |
| <input type="checkbox"/> Fosfaat ööpäevases uriinis*                | <input type="checkbox"/> Metamfetamiin uriinis                               |
| <input type="checkbox"/> Fosfaadi ja kreatiniini suhe uriinis       | <input type="checkbox"/> Barbituraadid uriinis                               |
| <input type="checkbox"/> Fosfaat uriinis                            | <input type="checkbox"/> Bensodiasapiinid uriinis                            |
| <input type="checkbox"/> Osmolaalsus uriinis                        | <input type="checkbox"/> Kannabinoidid uriinis                               |
| <input type="checkbox"/> Kusihae ööpäevases uriinis*                | <input type="checkbox"/> Kokaiin uriinis                                     |
| <input type="checkbox"/> Albumiin ööpäevases uriinis                | <input type="checkbox"/> Opiaadid uriinis                                    |
| <input type="checkbox"/> Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis      | <input type="checkbox"/> Metadoon uriinis                                    |
| <input type="checkbox"/> Kreatiniinikliirens (1,73 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/> Tritsüklilised antidepressandid uriinis             |
| patsiendi pikkus ..... cm, kaal ..... kg                            | <input type="checkbox"/> GHB uriinis                                         |

\* Uriini kogumise lühijuhend, erinõuded uriini kogumisel ja proovi transpordil (vaata pöördelt)

## Uriini kogumise lühijuhend

Uriini kogumiseks on vajalik spetsiaalne proovitops. Ära eemalda kaanelt kaitsekleebist enne uriini kogumist. Keera proovitopsilt kaas, kogu uriin proovitopsi ja keera kaas proovitopsile tagasi. Katsuti täitmiseks toimi järgmiselt:

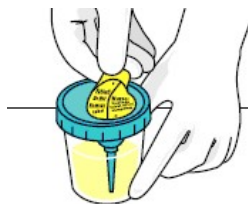

Eemalda topsi kaanelt kaitsekleebis, nähtavale ilmub kummiga kaetud nõel.



Suru kollase korgiga uriinikatsuti (korgiosa ees) proovitopsi kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab. Eemalda katsuti avausest.



Kleebi katsutile eHL juhtumi vöötkood või kirjuta patsiendi nimi. Märki tellimislehele uriini kogumise kuupäev ja kellaaeg.

Imikutel ja väikelastel kasuta uriini kogumiseks topsi asemel spetsiaalset kogumiskotti. Vaakumkatsuti täitmiseks kasuta ühekordset kõrt.

Saada uriinikatsuti laborisse. Proovitopsi või kogumiskotti laborisse ei saadeta!

## Ööpäevase uriini kogumine

Enne ööpäevase uriini kogumise alustamist tühjendab patsient põie. Seda uriiniportsjonit ei koguta, kuid kellaaeg registreeritakse uriini kogumise algusena. Seejärel urineerib patsient ööpäeva jooksul (või kogutakse uriin) kogumisnõusse, viimast korda täpselt 24 tunni möödudes peale kogumise algust. Uriini kogumisnõu hoida kogumisaja jooksul reeglina külmkapis. Enne laborisse saatetava proovi eraldamist kogu ööpäevane uriin mõõdetakse ja segatakse. Peale segamist valatakse spetsiaalsesse uriinitopsi umbes 50 mL uriini. Uriinikatsuti täitmiseks toimi uriini kogumise lühijuhendi järgi. Tellimislehele kirjutatakse uriini kogumise alguse kuupäev ja kellaaeg (proovivõtu kuupäev ja kellaaeg) ning 24 h uriini kogus.

## Erinõuded uriini kogumisel ja proovi transpordil laborisse

### Kaltsium (dU-Ca), magneesium (dU-Mg) ja fosfaat (dU-P) ööpäevases uriinis

Uriini kogumine toimub uriini hapustamisega. Hapustamine on vajalik selleks, et vältida kaltsiumi, magneesiumi ja fosfaatide väljasadenemist lahustumatute sooladena. Hapustamiseks valada pärast esimest uriiniportsjonit kogumisnõusse 25 mL 6 mol/L HCl. Valmismõõdetud soolhappe portsjonid saab vastuvõtu ja logistika osakonnast. NB! Ettevaatust söövitav! Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada.

### Metanefriin (dU-Meta) ja normetanefriin (dU-Normeta) ööpäevases uriinis

Uriini kogumine toimub uriini hapustamisega. Hapustamiseks valada pärast esimest uriiniportsjonit kogumisnõusse 10 mL 6 mol/L HCl. Valmismõõdetud soolhappe portsjonid saab vastuvõtu ja logistika osakonnast. NB! Ettevaatust söövitav! Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada. Katsutile märgitakse uriini kogumise alguse kuupäev. Proov toimetatakse laborisse viivitamatult sügavkülmutamiseks!

### Kusihape ööpäevases uriinis (dU-UA)

Uriini kogumisel peab uriini pH olema aluseline (>8), selleks lisatakse pärast esimest uriiniportsjonit kogumisnõusse 10 mL 5%-list NaOH. Valmismõõdetud naatriumhüdrosiidi portsjonid saab vastuvõtu ja logistika osakonnast. NB! Ettevaatust söövitav! Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada.

### 5-hüdoksüindooläädikhape ööpäevases uriinis (dU-5-HIAA)

Uriini kogumine toimub uriini hapustamisega. Hapustamiseks valada pärast esimest uriiniportsjonit kogumisnõusse 10 mL 6 mol/L HCl. Valmismõõdetud soolhappe portsjonid saab vastuvõtu ja logistika osakonnast. NB! Ettevaatust söövitav! Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada.